

Paravent plombé WD254

MAVIG



WD254 avec panneaux rabattus

- WD2541B** Paravent plombé mobile avec rabats et fenêtre, équivalence de plomb Pb 1,00 mm
WD2542B Paravent plombé mobile avec rabats et fenêtre, équivalence de plomb Pb 2,00 mm

CE


Made in Germany

Paravent plombé – WD254

Ce modèle classique combine la protection des parties supérieures et inférieures en un seul et unique équipement.

Le paravent est constitué d'un panneau central et de deux panneaux latéraux positionnables sur un angle de 60°-120°. Une fenêtre d'observation de 30 x 40 cm est intégrée au panneau central. Grâce à ses roulettes de qualité, le paravent est facile à positionner.

Le paravent WD254 est constitué d'un corps en bois stratifié, de couleur blanc-gris RAL 9002 avec une feuille de plomb pour revêtement intérieur. Deux équivalences de plomb sont disponibles selon l'application utilisée.

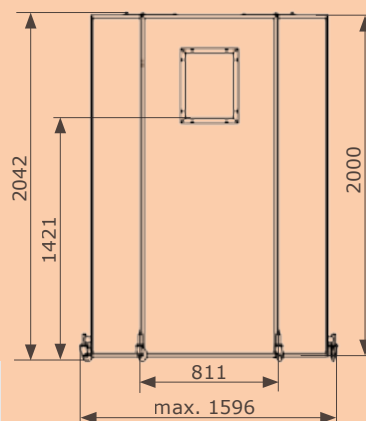

Dimensions paravent mobile avec fenêtre en acrylique plombé

Numéro Article	Panneau central (HxL)	Panneaux latéraux (HxL)	Equiv. Pb
WD2541B	80 x 200 cm, avec fenêtre à 30 x 40 cm	60 x 200 cm chaque	Pb 1,00 mm
WD2542B	80 x 200 cm, avec fenêtre à 30 x 40 cm	60 x 200 cm chaque	Pb 2,00 mm

MAVIG GmbH

X-Ray Protection and Medical Suspension Systems

Stahlgruberring 5
81829 Munich
Allemagne

Boîte postale 82 03 62
81803 Munich
Allemagne

Tél: +49 (0) 89 420 96 - 0
Fax: +49 (0) 89 420 96 - 200
e-Mail: info@mavig.com

www.mavig.com